
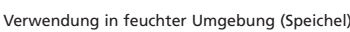
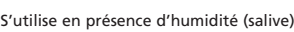
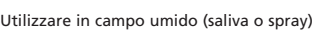


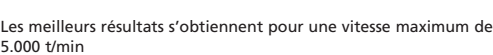
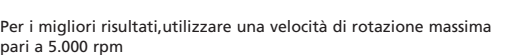



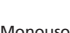



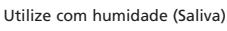
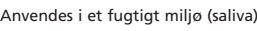

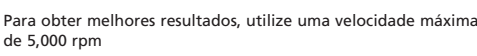
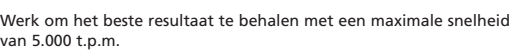


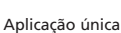

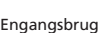
Reprocessing for Pasteless Proply

English					
Indication: <p>Pasteless Propphy is indicated for professional tooth cleaning on tooth enamel surfaces when extreme staining occurs. Pasteless Propphy is to be used as a final step and only topically after polishing with Cleanic. It provides fluoride release (0.9% fluoride as sodium fluoride) and maximum smoothness (comparable to Cleanic). Latex free.</p>					
Important Instructions when using Pasteless Propphy: <p>Simply select the best suited Pasteless Propphy shape (Cup, Flame or Disc) for the area of the tooth that you wish to treat.</p>					

	Use in moist environment (Saliva)		Verwendung in feuchter Umgebung (Speichel)		S'utilise en présence d'humidité (salive)		Utilizzare in campo umido (saliva o spray)
	For best results use a speed of maximum 5,000 rpm		Für beste Resultate Drehzahl von max. 5000 U/min wählen		Les meilleurs résultats s'obtiennent pour une vitesse maximum de 5.000 t/min		Per i migliori risultati,utilizzare una velocità di rotazione massima pari a 5.000 rpm
	Single use		Nur zum Einmalgebrauch		Jetable		Monouso



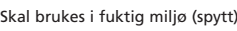
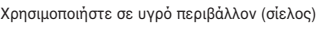



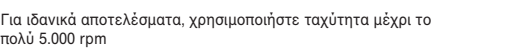



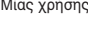
Order Information:							
Pasteless Propphy	Cup	Pack of 15	1950	Bestellinformationen:			
Pasteless Propphy	Flame	Pack of 15	1951	Pasteless Propphy	Kelch	Packung à 15 Stück	1950
Pasteless Propphy	Disc	Pack of 15	1952	Pasteless Propphy	Flamme	Packung à 15 Stück	1951
Pasteless Propphy	Assorted	Pack of 15	1953	Pasteless Propphy	Scheibe	Packung à 15 Stück	1952
		(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)		Pasteless Propphy	Sortiment	Packung à 15 Stück	1953
						(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)	
Commandes :				Commandes :			
Pasteless Propphy	Cupules	boîte de 15	1950	Pasteless Propphy	Cupules	boîte de 15	1950
Pasteless Propphy	Flammes	boîte de 15	1951	Pasteless Propphy	Flammes	boîte de 15	1951
Pasteless Propphy	Disques	boîte de 15	1952	Pasteless Propphy	Disques	boîte de 15	1952
Pasteless Propphy	Assortiment	boîte de 15	1953	Pasteless Propphy	Assortiment	boîte de 15	1953
		(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)	
Informazioni per l'Ordine:				Informazioni per l'Ordine:			
Pasteless Propphy	Coppetta	Confezione da 15	1950	Pasteless Propphy	Coppetta	Confezione da 15	1950
Pasteless Propphy	Fiamma	Confezione da 15	1951	Pasteless Propphy	Fiamma	Confezione da 15	1951
Pasteless Propphy	Disco	Confezione da 15	1952	Pasteless Propphy	Disco	Confezione da 15	1952
Pasteless Propphy	Assortimento	Confezione da 15	1953	Pasteless Propphy	Assortimento	Confezione da 15	1953
		(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)	

Español					
Indicación: <p>Pasteless Propphy está indicada para la limpieza dental profesional de la superficie del esmalte dental cuando existen manchas extremadamente difíciles. Pasteless Propphy se debe utilizar como paso final y sólo de modo tópico después del pulido con Cleanic. Proporciona liberación de fluoruro (0,9% como fluoruro de sodio) y una suavidad máxima, similar a Cleanic. Sin látex.</p>					
Instrucciones importantes para la utilización de Pasteless Propphy: <p>Seleccione directamente la forma de Pasteless Propphy más adecuada (copa, llama o disco) para la superficie del diente que desea tratar.</p>					
Portugués					
Indicações: <p>Pasteless Propphy está indicado para uma limpeza profissional da superfície esmaltada dos dentes em casos de acumulação de manchas. Pasteless Propphy deve utilizar-se como passo final e unicamente de uso tópico, após polir com Cleanic. Proporciona libertação de fluoreto (0,9% fluoreto como fluoreto de sódio) e uma suavidade máxima (semelhante à Cleanic). Sem látex.</p>					
Instruções importantes quando se utilizar Pasteless Propphy: <p>Basta escolher a forma de Pasteless Propphy que melhor se adapte (Copa, Chama ou Disco) à zona do dente que se quer tratar.</p>					


	Utilícela en un entorno húmedo (saliva)		Utilize com humidade (Saliva)		Zorg voor een vochtige omgeving (speeksel)		Anvendes i et fugtigt miljø (saliva)
	Para obtener unos resultados óptimos emplee una velocidad máxima de 5.000 rpm		Para obter melhores resultados, utilize uma velocidade máxima de 5,000 rpm		Werk om het beste resultaat te behalen met een maximale snelheid van 5.000 t.p.m.		Det bedste resultat opnås med en hastighed på max 5.000 /min.
	Un solo uso		Aplicação única		Voor eenmalig gebruik		Engangsbrug

Información sobre pedidos:				Informações para as encomendas:				Bestillingsinformation:							
Pasteless Propphy	Copa	Paquete de 15	1950	Pasteless Propphy	Copa	Pacote de 15	1950	Pasteless Propphy	Cup	Verp. à 15 st.	1950	Pasteless Propphy	Kop	Pakning med 15 stk.	1950
Pasteless Propphy	Llama	Paquete de 15	1951	Pasteless Propphy	Chama	Pacote de 15	1951	Pasteless Propphy	Vlam	Verp. à 15 st.	1951	Pasteless Propphy	Point	Pakning med 15 stk.	1951
Pasteless Propphy	Disco	Paquete de 15	1952	Pasteless Propphy	Disco	Pacote de 15	1952	Pasteless Propphy	DisK	Verp. à 15 st.	1952	Pasteless Propphy	Skive	Pakning med 15 stk.	1952
Pasteless Propphy	Combinado	Paquete de 15	1953	Pasteless Propphy	Sortido	Pacote de 15	1953	Pasteless Propphy	Gesorteerd	Verp. à 15 st.	1953	Pasteless Propphy	Assorteret	Pakning med 15 stk.	1953
		(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 st. elk art nr. 1950,1951,1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)	

Suomi					
Indikaatio: <p>Pasteless Propphy:a käytetään ammattimaisessa hampaiden puhdistuksessa, kun hampaan kiille on erittäin voimakkaasti värjäytynyt. Pasteless Propphy:a tulee käyttää ainoastaan hampaan pintapuhdistuksessa viimeisenä vaiheena Cleanic-kiillotuksen jälkeen. Siitä vapautuu fluoria (0.9% natriumfluoridia) ja sen avulla saavutetaan maksimaalinen kiilto (verrattavissa Cleanic:illä saatavaan tulokseen). Ei sisällä lateksia.</p>					
Tärkeät ohjeet käytettäessä Pasteless Propphy:a <p>Valitset vain sopivimman muotoisen Pasteless Propphy:n (kuppi, liekki tai kiekko) sen mukaan, mitä hampaan aluetta haluat käsitellä.</p>					
Svenska					
Indikationer: <p>Pasteless Propphy är avsedd för professionell rengöring av extremt missfärgad tandemalj. Pasteless Propphy ska användas endast vid behov som sista steg, efter rengöring med Cleanic. Den har fluoravgivning (0.9% natriumfluorid) och ger maximal ytsläthet (jämförbar med Cleanic). Pasteless Propphy är helt fri från latex.</p>					
Viktig information vid användning Pasteless Propphy: <p>Använd den mest passande formen av Pasteless Propphy (Cup, Flame eller Disc) för den tandyta du avser att behandla.</p>					
Norsk					
Indikasjon: <p>Pasteless Propphy er indisert for profesjonell tannrengjøring på tannemaljeoverflater når ekstrem misfarging oppstår. Pasteless Propphy skal brukes som et avsluttende steg, og kun topisk, etter polering med Cleanic. Den frigjør fluor (0,9 % fluor som natriumfluor) og gir maksimal glatthet (tilsvarende Cleanic). Lateksfri.</p>					
Viktige instruksjoner ved bruk av Pasteless Propphy: <p>Velg den best egnede Pasteless Propphy-formen (kopp, flamme eller skive) for det området av tannen du ønsker å behandle.</p>					

	Käytä kosteana (Sylki)		Används i fuktig miljö (saliv)		Skal brukes i fuktig miljø (spytt)		Χρησιμοποιήστε σε υγρό περιβάλλον (σάλιο)
	Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen käytä korkeintaan 5,000 kierrosta per/min nopeutta		För bästa resultat sätt vinkelstycket på max varvtal på 5,000 rpm		For best resultat bruk en hastighet på maksimalt 5000 opm		Για ιδανικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ταχύτητα μέχρι το πολύ 5.000 rpm
	Kertakäyttöinen		Engångsbruk		Engangsbruk		Μίας χρήσης

Tilustiedot:				Orderinformation:				Bestillingsinformasjon:				Πληροφορίες παραγγελιών:			
Pasteless Propphy	Kuppi	15 kpl pakkaus	1950	Pasteless Propphy	Cup	Förp. med 15 st.	1950	Pasteless Propphy	Kopp	Pakke med 15	1950	Pasteless Propphy	Σχήμα Cup	(συσκευασία των 15)	1950
Pasteless Propphy	Liekki	15 kpl pakkaus	1951	Pasteless Propphy	Flame	Förp. med 15 st.	1951	Pasteless Propphy	Flamme	Pakke med 15	1951	Pasteless Propphy	Σχήμα Flame	(συσκευασία των 15)	1951
Pasteless Propphy	Kiekko	15 kpl pakkaus	1952	Pasteless Propphy	Disc	Förp. med 15 st.	1952	Pasteless Propphy	Skive	Pakke med 15	1952	Pasteless Propphy	Σχήμα Disc	(συσκευασία των 15)	1952
Pasteless Propphy	Lajitelma	15 kpl pakkaus	1953	Pasteless Propphy	Assorted	Förp. med 15 st.	1953	Pasteless Propphy	Assortert	Pakke med 15	1953	Pasteless Propphy	Διάφορα σχήματα	(συσκευασία των 15)	1953
		(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)				(5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)	

<p>Manufactured by KerrHawe SA Via Strecce 4, 6934 Bioggio Switzerland www.KerrHawe.com 00800 41 05 05 05</p>		<p>Kerr U.S.A. 1717 West Collins Avenue Orange, CA 92867 (800) KERR-123 KerrDental.com</p>	<p>Kerr Australia Pty. Ltd. Unit 11 112-118 Talavera Road North Ryde 2113 New South Wales, Australia 61-29-870-7500</p>	<p>Sybron Dental Specialities Japan, Inc. 29-24 Honkomagone 2-chome Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 Japan 0120-18-3126</p>		<p>CODE7</p>
---	---	--	---	--	---	---------------------

Reprocessing for reusable instruments

Polski			
Wskazania: <p>Gumki Pasteless Propy przeznaczone są do profesjonalnego oczyszczania zębów w przypadku ekstremalnych przebarwień powierzchni szkliwa. Pasteless Propy stosuje się miejscowo, po wypolerowaniu powierzchni szkliwa z zastosowaniem pasty Cleanic. Pasteless Propy uwalniają fluor (zawierają 0,9% fluoru w postaci fluorku sodu) i umożliwiają uzyskanie maksymalnej gładkości powierzchni (porównywalnej z gładkością uzyskiwaną po zastosowaniu pasty Cleanic). Nie zawierają lateksu.</p>			
Ważne wskazówki dotyczące stosowania Pasteless Propy: <p>Wybrać gumkę Pasteless Propy w kształcie (kielich, płomyk, dysk) najlepiej dostosowanym do kształtu oczyszczanej powierzchni zęba.</p>			

	Stosować z dostępem wilgoci (śliny)	Nedves (nyálás) környezetben használja	Použití ve vlhkém prostředí (Saliva)	Používajte vo vlhkom prostredí (sliny)
	Maksymalna prędkość obrotowa: 5,000 obr/min	Az optimális eredmény érdekében 5000 fordulat/perc sebességgel dolgozzon	Nejlepších výsledků dosáhnete použitím maximální rychlosti 5 000 ot./min.	Najlepšie výsledky získate pri použití maximálne 5 000 otáčok za minútu
	Produkt do jednorazowego użycia	Egyszerhasználatos	Jednorázové použití	Na jednorazové použitie

Informacje o zamówieniu: <p>Pasteless Propy Kielich 15 szt. 1950 Pasteless Propy Płomyk 15 szt. 1951 Pasteless Propy Dysk 15 szt. 1952 Pasteless Propy Asortyment 15 szt. 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Order Information: <p>Pasteless Propy Kehely 15 db/csomag 1950 Pasteless Propy Láng 15 db/csomag 1951 Pasteless Propy Korong 15 db/csomag 1952 Pasteless Propy Szortiment 15 db/csomag 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Informace pro objednávání: <p>Pasteless Propy Kalíšek Balení 15 1950 Pasteless Propy Plamen Balení 15 1951 Pasteless Propy Kotouč Balení 15 1952 Pasteless Propy Různé druhy Balení 15 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Informácie o objednávaní: <p>Pasteless Propy Miska 15-kusové balenie 1950 Pasteless Propy Plameň 15-kusové balenie 1951 Pasteless Propy Disk 15-kusové balenie 1952 Pasteless Propy Zmiešané 15-kusové balenie 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>
--	---	---	---

Română			
Indicații: <p>Pasteless Propy este indicat pentru curățarea dentară profesionistă, pe suprafețele de smalț ale dinților, în cazul apariției petelor. Pasteless Propy se va utiliza ca pas final și doar în ordine, după lustruirea cu Cleanic. Acesta oferă o doză de fluorură (0,9 % fluorură sub formă de fluorură de sodiu) și o suprafață extrem de fină (în comparație cu Cleanic). Fără latex.</p>			
Instrucțiuni importante la utilizarea Pasteless Propy: <p>Selectați cea mai potrivită formă de Pasteless Propy (cupă, flacăra sau disc) pentru zona dintelui pe care doriți să o tratați.</p>			

	A se utiliza în mediu umed (salivă)	Использовать во влажной среде (слюна)	Исползвайте във влажна среда (слюнка)	Kasutamiseks niiskes keskkonnas (sülg)
	Pentru rezultate optime, utilizați o viteză maximă de 5.000 rpm	Для лучшего результата используйте скорость вращения не более 5.000 об./мин.	За най-добри резултати използвайте максимална скорост от 5000 оборота/минута	Maksimaalne kiirus parimate tulemuste saavutamiseks: 5000 p/min
	De unică folosință	Однократное применение	За еднократна употреба	Ühekordseks kasutamiseks

Informații pentru comandă: <p>Pasteless Propy Cupă Pachet de 15 1950 Pasteless Propy Flacăra Pachet de 15 1951 Pasteless Propy Disc Pachet de 15 1952 Pasteless Propy Asortat Pachet de 15 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Информация для заказов <p>Pasteless Propy Чашечка Упаковка 15 шт. 1950 Pasteless Propy Пламя Упаковка 15 шт. 1951 Pasteless Propy Диск Упаковка 15 шт. 1952 Pasteless Propy Ассорти Упаковка 15 шт. 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	За поръчки: <p>Pasteless Propy Чашка Опаковка с 15 бр. 1950 Pasteless Propy Плика Опаковка с 15 бр. 1951 Pasteless Propy Диск Опаковка с 15 бр. 1952 Pasteless Propy Различни форми Опаковка с 15 бр. 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Tellimisandmed: <p>Pasteless Propy Cup pakendis 15 tk 1950 Pasteless Propy Flame pakendis 15 tk 1951 Pasteless Propy Disc pakendis 15 tk 1952 Pasteless Propy Segapakend pakendis 15 tk 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>
---	--	--	--

Lietuva			
Indikacija <p>Pasteless Propy skirtas profesionaliam danties valymui danties emalės paviršiuose, kai apnašas yrač gausus. Pasteless Propy naudojamas tik baigiamajame etape ir tik vietiškai, po šlifavimo su Cleanic. Iš jo atspalaiduoja fluoridas (0,9% fluorido natrio fluorido pavidale), jis yra labai lygus (panašiai kaip Cleanic). Be lateksu.</p>			
Svarbūs nurodymai naudojant Pasteless Propy: <p>Tiesiog pasirinkite geriausiai tinkančią Pasteless Propy formą (puodelio, liepsnos arba disko) danties plotui, kurį norite apdoroti.</p>	Svarigi norādījumi, lietojot Pasteless Propy: <p>Vienkārši izvēlieties vispiemērotāko Pasteless Propy formu (kausiņu, konusu vai disku) zoba rajonam, ko vēlaties apstrādāt.</p>	Pomembna navodila pri uporabi pastel Pasteless Propy: <p>Preprosto izberite pastilo Pasteless Propy najbolj ustrezne oblike (skodelico, plamen ali ploščico) za predel zoba, ki ga želite obdelati.</p>	Endikasyon: <p>Pasteless Propy lekelenmenin çok fazla olduđu durumlarda diřin mine yüzeylerine uygulanacak profesyonel diř temizliğinde endikedir. Pasteless Propy, Cleanic ile polisajdan sonra son iřlem olarak ve yalnızca topikal olarak kullanılmalıdır. Florür salım (sodyum florür olarak %0,9 florür) özelliđine sahiptir ve maksimum düzeyde yüzey pürüzsüzlüđü (Cleanic'e yakın) sağlar. Lateks içermez.</p>
		Pasteless Propy kullanımına ilişkin Önemli Talimatlar: <p>İřlemi uygulamak istediđiniz diř bölgesine en uygun Pasteless Propy formunu (Klasik, Alev Uçlu veya Disk) seçin.</p>	

	Naudokite drėgnoje aplinkoje (seilės)	Lietojiet mitrā vidē (siekalās)	Uporaba v vlažnem okolju (slina)	Nemli ortamda (Tükürük) kullanın
	Kad rezultatai būtų geresni, naudokite didžiausią 5 000 apsisukimų per minutę greitį	Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet ātrumu, kas nepārsniedz 5 000 apgriezienu/min.	Za najboljše rezultate uporabljajte hitrost do 5.000 obr./min.	En iyi sonucu almak için maksimum 5,000 rpm devirde çalışın
	Vienkartinis	Vienreizējai lietošanai	Za enkratno uporabo	Tek kullanımlıktır

Užsakymo informacija: <p>Pasteless Propy puodelis 15 vienetų pakuotė 1950 Pasteless Propy liepsna 15 vienetų pakuotė 1951 Pasteless Propy diskas 15 vienetų pakuotė 1952 Pasteless Propy įvairūs 15 vienetų pakuotė 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Pasūtišanas informācija: <p>Pasteless Propy Kausiņš iepakojumā 15 gab. 1950 Pasteless Propy Konuss iepakojumā 15 gab. 1951 Pasteless Propy Disks iepakojumā 15 gab. 1952 Pasteless Propy Dažādi veidi iepakojumā 15 gab. 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Informacije za naročanje: <p>Pasteless Propy skodelica pakiranje po 15 1950 Pasteless Propy plamen pakiranje po 15 1951 Pasteless Propy ploščica pakiranje po 15 1952 Pasteless Propy sortiment pakiranje po 15 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>	Sipariş Bilgileri: <p>Pasteless Propy Klasik Uçlu 15'li paket 1950 Pasteless Propy Alev Uçlu 15'li paket 1951 Pasteless Propy Disk Uçlu 15'li paket 1952 Pasteless Propy Muhtelif 15'li paket 1953 (5 x 1950, 5 x 1951, 5 x 1952)</p>
--	---	--	--

Polski

Wskazania:

Gumki Pasteless Propy przeznaczone są do profesjonalnego oczyszczania zębów w przypadku ekstremalnych przebarwień powierzchni szkliwa. **Pasteless Propy** stosuje się miejscowo, po wypolerowaniu powierzchni szkliwa z zastosowaniem pasty Cleanic. **Pasteless Propy** uwalniają fluor (zawierają 0,9% fluoru w postaci fluorku sodu) i umożliwiają uzyskanie maksymalnej gładkości powierzchni (porównywalnej z gładkością uzyskiwaną po zastosowaniu pasty Cleanic). Nie zawierają lateksu.

Ważne wskazówki dotyczące stosowania Pasteless Propy:

Wybrać gumkę **Pasteless Propy** w kształcie (kielich, płomyk, dysk) najlepiej dostosowanym do kształtu oczyszczanej powierzchni zęba.

Magyar

Indikáció:

A Pasteless Propy a zománc felszínek professzionális tisztítására való, az extrém fogkőképződéstől szenvedő páciensek esetében. A polírozás végső fázisaként alkalmazandó és csak, a felszínek előzetesen már Cleanic-kel történt polírozása után használható. **A Pasteless Propy** fluoridot ad le (0.9% fluorid sodium fluorid formájában) és maximális felszíni simaságot eredményez. Latex mentes.

Fontos információk a Pasteless Propy használatához:

Egyszerűen válassza ki a kezelendő felülethez legmegfelelőbb formát (kehely, láng vagy tárcsa).

Česky

Indikace:

Pasteless Propy (bez pasty) je určen pro odborné čištění povrchu zubní skloviny v případě extrémního zabarvení. **Pasteless Propy** se má použít jako konečný krok a pouze místně po vyleštění přípravkem Cleanic. Zajišťuje uvolňování fluoridu (0,9 % fluoridu jako fluoridu sodného) a maximální hladkost (srovnatelnou s Cleanic). Neobsahuje latex.

Důležité pokyny pro používání Pasteless Propy:

Jednoduše si zvolte nejlépe vyhovující formu **Pasteless Propy** (kalíšek, plamen nebo kotouč) pro oblast zubu, kterou chcete ošetřit.

Slovensky

Indikácia:

Pasteless Propy je indikovaný na odborné čistenie zubov na povrchoch zubnej skloviny pri extrémnom výskyte zubného kameňa. **Pasteless Propy** sa používa ako posledný krok a iba lokálne po vyleštení prípravkom Cleanic. Uvoľňuje fluorid (0,9 % fluorid vo forme fluoridu sodného) a poskytuje maximálnu hladkosť (porovnateľnú s prípravkom Cleanic). Neobsahuje latex.

Dôležité pokyny na použitie prípravku Pasteless Propy:

Jednoducho vyberte najvhodnejší tvar prípravku **Pasteless Propy** (miska, plameň alebo disk) pre oblasť zuba, ktorý chcete liečiť.

Română

Indicații:

Pasteless Propy este indicat pentru curățarea dentară profesionistă, pe suprafețele de smalț ale dinților, în cazul apariției petelor. **Pasteless Propy** se va utiliza ca pas final și doar în ordine, după lustruirea cu Cleanic. Acesta oferă o doză de fluorură (0,9 % fluorură sub formă de fluorură de sodiu) și o suprafață extrem de fină (în comparație cu Cleanic). Fără latex.

Instrucțiuni importante la utilizarea Pasteless Propy:

Selectați cea mai potrivită formă de **Pasteless Propy** (cupă, flacăra sau disc) pentru zona dintelui pe care doriți să o tratați.

Русский

Показания:

Pasteless Propy предназначена для профессиональной очистки поверхности зубной эмали при очень сильном загрязнении. **Pasteless Propy** следует использовать для финишной обработки и только для местного применения после полировки при помощи Cleanic. Обеспечивает подачу фторида (0,9% фторида в виде фторида натрия) и максимальную гладкость поверхности (по сравнению с Cleanic). Не содержит латекса.

Важные рекомендации по использованию Pasteless Propy:

Просто выберите наиболее подходящую форму **Pasteless Propy** («чашечка», «пламя» или «диск») для той области зуба, которую Вы хотите обработать.

Български

Показания:

Pasteless Propy е показан за професионално почистване на емайловите повърхности на зъбите в случаи на силно оцветяване. **Pasteless Propy** следва да се използва само като финализираща стъпка и само локално след полиране с Cleanic. Осигурява освобождаване на флуорид (0,9 % флуорид под формата на натриев флуорид) и максимална гладкост (сравнимо с Cleanic). Не съдържа латекс.

Важни инструкции при използването на Pasteless Propy:

Просто изберете най-подходящата форма **Pasteless Propy** (чашка, пика или диск) за тази част от зъба, която искате на третирате

Eesti

Näidustus:

Pasteless Propy on näidustatud hambaemali pinna professionaalseks puhastamiseks eriti tugevate plekkide korral. **Pasteless Propy**’t võib kasutada viimase sammuna ja ainult paikselt pärast Cleanic’uga poleerimist. Sellest eraldub fluoriidi (0,9% fluoriidi naatriumfluoriidina) ning see tagab maksimaalse sileduse (võrreldav Cleanic’uga). Lateksivaba.

Tähtsad juhised Pasteless Propy kasutamiseks:

Valige lihtsalt ravitava hamba piirkonnaga kõige paremini sobiv **Pasteless Propy** kuju (Cup, Flame või Disc).

عربي

ت

حر