

Masy wyciskowe



ALGINATOWE MASY WYCISKOWE	1.2
MASY ALTERNATYWNE DLA ALGINATÓW	1.2
MASY A-SILIKONOWE	1.3
AKCESORIA	1.5
ŁYŻKI WYCISKOWE	1.7
MASY POLISULFIDOWE	1.7
MASA TERMOPLASTYCZNA	1.7
WYCISKI CZYNNOŚCIOWE	1.8
REJESTRACJA ZWARCIA	1.8
WOSKI	1.9

Alginate Impression Material

Take 1 Alginate

Take 1 Alginate łączy kliniczną wszechstronność z wyjątkową łatwością użycia. Zmiana koloru ułatwia kontrolę czasu, a elastyczność, stabilność wymiarów, wierność odwzorowania detali oraz możliwość odlania modelu do 120 godzin (przy 100% wilgotności) zapewniają powtarzalne, pewne efekty. Alginate firmy Kerr cechują:

- trzypiętowa zmiana koloru,
- optymalna odporność na rozrywanie,
- **czas pracy:** 1:50 min,
- odlanie modelu do 120 godzin,
- niewielka deformacja,
- **czas wiązania:** 2:30 min.

Take 1 Alginate 33342

Słoik z masą (500 g), miarka do płynu i miarka do proszku.

Take 1 Alginate 33343

20 x 450 g torebek z masą, 5 miarek do płynu i 5 miarek do proszku.



Take 1 Alginate, 500g



Take 1 Alginate, 450g

Masy alternatywne dla alginatów

AlgiNot and AgiNot FS

AlgiNot™ jest masą o bardzo wysokiej jakości, stanowiącą alternatywę dla klasycznego alginatu. Wpływa na oszczędność czasu i pieniędzy, dając jednocześnie wyjątkową precyzję odwzorowania. Jest prosta w użyciu i oszczędza ogromną ilość czasu, pozwalając na przyjęcie większej liczby pacjentów w gabinecie.

Wskazania: wyciski do czasowych koron i mostów, wyciski zębów przeciwstawnych oraz wyciski do modeli orientacyjnych, diagnostycznych i ortodontycznych, a także szyn wybielających i szyn ochronnych dla sportowców.

- Bez mieszania ręcznego. Eliminacja brudzącej, wymagającej kłopotliwego sprzątnięcia masy. Oszczędność czasu i pieniędzy, większa wydajność pracy.
- Dwa sposoby konfekcjonowania: naboje do podajnika lub pojemniki Volume™ do automatycznego mieszalnika.
- Zmniejszenie liczby wykonywanych wycisków. Z jednego wycisku można wykonać kilka modeli.
- Stabilność wycisku w czasie. Wyciski można odlewać w dowolnym momencie, bez ograniczeń czasowych.
- Odporność na preparaty do dezynfekcji. Brak ryzyka uszkodzenia wycisku podczas dezynfekcji.
- Oszczędność czasu i pieniędzy. Zwiększenie produktywności gabinetu.

- **Czas pracy** (naboje): 1 min / **Czas wiązania** (naboje): 2:30 min
- **Czas pracy** (opakowania Volume): 1:15 min / **Czas wiązania** (opakowania Volume): 2:45 min

AlgiNot Cartridge Intro Kit - AlgiNot w nabojach, zestaw wprowadzający 33034

Zawartość: 6 x 50 ml nabojów z masą, 12 dużych końcówek mieszających

AlgiNot Volume Intro Kit - AlgiNot w opakowaniach Volume, zestaw wprowadzający 33040

Zawartość: 300 ml pasty bazowej, 62 ml katalizatora, 1 magazynek wielokrotnego użytku, 10 końcówek mieszających Dynamic

AlgiNot - uzupełnienia

AlgiNot Value Pack, 24 naboje x 50 ml 33035

AlgiNot 6 x 300 ml pasty bazowej, 6 x 62 ml katalizatora 33041



AlgiNot w nabojach, zestaw wprowadzający 33034



AlgiNot Volume, zestaw wprowadzający 33040



Kerr Volume, automatyczny mieszalnik do mas wyciskowych 33171



AlgiNot FS Volume Intro Kit 33818

NOWOŚĆ

AlgiNot FS™

Szybkowiążąca wersja AlgiNot, która skraca czas zabiegu i poprawia komfort pacjenta, bez zmniejszenia jakości wycisku. Poprawione własności tiksotropowe i doskonała konsystencja sprawiają, że AlgiNot FS nie spływa z powierzchni filarów i żyłki.

- **Czas pracy** (naboje): 1 min / **Czas wiązania** (naboje): 2 min
- **Czas pracy** (opakowania Volume): 1 min / **Czas wiązania** (opakowania Volume): 2:15 min

Nr kat.

NOWOŚĆ

AlgiNot FS Cartridge Intro Kit - AlgiNot FS w nabojach, zestaw wprowadzający **33816**

Zawartość: 6 x 50 ml nabołów z masą, 12 dużych końcówek mieszających

NOWOŚĆ

AlgiNot FS Volume Intro Kit - AlgiNot w opakowaniach Volume, zestaw wprowadzający **33818**

Zawartość: 300 ml pasty bazowej, 62 ml katalizatora, 1 magazynek wielokrotnego użytku, 10 końcówek mieszających Dynamic

NOWOŚĆ

AlgiNot FS - uzupełnienia

AlgiNot Value Pack, 24 naboje x 50 ml **33817**

AlgiNot 6 x 300 ml pasty bazowej, 6 x 62 ml katalizatora **33819**

Akcesoria

Podajnik do mas w nabojach **28747**

Duże końcówki mieszające, turkusowe, 48 szt. **29333 E**

Mieszalnik automatyczny Kerr Volume Mixer **33171**

Magazynek do opakowań Volume **32503 E**

Końcówki mieszające Dynamic do wersji Volume, 50 szt. **32502 E**

Klej do żyłek VPS Adhesive, butelka 15 ml **16622**

Klej do żyłek VPS Adhesive, butelka 60 ml **25777**



AlgiNot FS Cartridge

Masy A-silikonowe

Extrude

Masa wyciskowa Extrude stanowi standard wśród mas wyciskowych, w stosunku do którego ocenia się inne silikonu addycyjne. Pięć różnych gęstości, w tym masa putty, gwarantują doskonale rezultaty bez względu na stosowaną technikę wyciskową.

Extrude Wash - masa jasnoniebieska

Materiał o bardzo małej gęstości, stosowany w połączeniu z masą putty w metodzie dwuczasewej lub z masą Extrude Extra w technice dwuwarstwowej jednoczasowej.

2 naboje **28418**

2 x 50 ml naboje z masą rzadką, 6 końcówek mieszających

32 naboje **28419**

16 zestawów 28418, masa rzadka

Extrude Medium - masa zielona

Masa o średniej gęstości charakteryzująca się doskonałym zapływowaniem, umożliwiającym wierne odwzorowanie szczegółów preparacji. Odpowiednia gęstość masy zapobiega jej spływaniu z łyżki wyciskowej.

2 naboje **28416**

2 x 50 ml naboje z masą średnio gęstą, 6 końcówek mieszających

32 naboje **28417**

16 zestawów 28416, masa średnio gęsta (medium)

Extrude Extra - masa fioletowa

Masa o wysokiej gęstości, stosowana indywidualnie lub z innymi masami Extrude. Szczególnie polecana do stosowania z masą Extrude Wash, w technice jednoczasowej.

2 naboje **28414**

2 x 50 ml naboje z masą gęstą, 6 końcówek mieszających

32 naboje **28415**

16 zestawów 28414, masa gęsta

Extrude MPV - masa ciemnozielona

Masa o uniwersalnej gęstości, szczególnie przydatna w technice jednofazowej.

2 naboje **28420**

2 x 50 ml naboje z masą o uniwersalnej gęstości, 6 końcówek mieszających

32 naboje **28421**

16 zestawów 28420, masa MPV

Extrude XP Putty

Masa o konsystencji putty stosowana jako pierwsza warstwa w wyciskach dwuwarstwowych, przeznaczona do techniki zarówno jednoczasowej, jak i dwuczasewej. Najwyższa gęstość ułatwia wprowadzanie masy płynnej do bruzdy dziąsłowej i idealne odwzorowanie pola protetycznego.

Extrude XP Putty **27877**

2 x 520 ml słoiki z masą, miarki do masy, folia separacyjna



Extrude
Masa fioletowa, ciemnozielona, jasnoniebieska, zielona



Extrude XP Putty **27877**



NOWOŚĆ

Take 1[®] Advanced™

Nowa, poliwinylsiloksanowa masa wyciskowa Take 1 Advanced powstała na bazie wieloletnich doświadczeń firmy Kerr w dziedzinie mas wyciskowych i najnowszych osiągnięć nauki. Jest to pierwsza masa A-silikonowa o optymalnej kombinacji własności mechanicznych: odporności, elastyczności, stabilności wymiarów i zdolności do rejestracji szczegółów w każdym środowisku.

Take 1 Advanced to największy wybór gęstości, czasów wiązania i sposobów dozowania - cechy te sprawiają, że każdy lekarz poczuje się tak, jakby masa była stworzona specjalnie dla niego. Take 1 Advanced spełnia wszelkie indywidualne wymagania, eliminując potrzebę posiadania wielu produktów do różnych technik i wskazań klinicznych. W odróżnieniu od wszystkich zwykłych mas wyciskowych, Take 1 Advance posiada unikalny skład chemiczny, który zapewnia perfekcyjne połączenie wszystkich właściwości. Wpływa to na wyjątkowo doskonale zachowanie masy w każdych warunkach.

Wyjątkowa odporność na rozrywanie i zdolność do wydłużania. Mocna, elastyczna masa rozciąga się w czasie wyjmowania wycisku, bez rozrywania i deformacji.

Hydrofilne masy o małej gęstości. Przemieszczają płyny umożliwiając pobranie wycisku o perfekcyjnej dokładności, bez tworzenia pustych przestrzeni czy pęcherzy.

Doskonała stabilność wymiarów. Wycisk nie ulega deformacji wraz z upływem czasu.

Największy wybór gęstości, czasów wiązania i sposobów dozowania.

Pomaga przezwyciężyć trudności związane z pobraniem wycisku i spełnia wszelkie wymagania lekarzy.

Zestawy wprowadzające

Take 1 Advanced Cartridge Intro Kit Fast Set – zestaw wprowadzający, masy szybko wiążące **34140**

Zawartość: 1 x 50 ml naboń z masą Light Body Wash Fast Set, 1 x 50 ml naboń z masą Regular Body Wash Fast Set, 3 x 50 ml naboje z masą Tray Fast Set, 1 x 50 ml naboń z masą Bite Registration, podajnik, 6 małych końcówek mieszających, 6 małych końcówek wewnętrznych, 6 dużych końcówek mieszających.

Take 1 Advanced Putty/Wash Intro Kit Fast Set – zestaw wprowadzający Putty/Wash, masy szybko wiążące **34141**

Zawartość: 1 x 400 g słoik z pastą bazową Putty Fast Set, 1 x 400 g słoik z pastą katalizatora Putty Catalyst Fast Set, 2 miarki do masy Putty, 18 pasków folii separacyjnej, 2 x 50 ml naboje z masą Regular Body Wash Fast Set, podajnik, 6 małych końcówek mieszających, 6 małych końcówek wewnętrznych.

Take 1 Advanced Volume Intro Kit Fast Set – zestaw wprowadzający, masy szybko wiążące **34142**

Zawartość: 1 x 300 ml pasty bazowej Tray Base Fast Set, 1 x 62 ml katalizatora Tray Catalyst Fast Set, 1 magazynek wielokrotnego użytku do mas Volume, 10 końcówek mieszających Dynamic do mieszalnika automatycznego, 1 x 15 ml butelka Adhesive, 2 x 50 ml naboje masy Light Body Wash Fast Set, 2 x 50 ml naboje masy Regular Body Wash Fast Set, 12 małych końcówek mieszających, 12 małych końcówek wewnętrznych.

Uzupełnienia masy Putty (do mieszania ręcznego)

Take 1 Advanced Putty Fast Set **34144**

Zawartość: 1 x 400 g słoik z pastą bazową Putty Fast Set, 1 x 400 g słoik z pastą katalizatora Putty Catalyst Fast Set, 18 pasków folii separacyjnej

Uzupełnienia mas Volume

Każde opakowanie zawiera: 2 x 300 ml pasty bazowej, 2 x 62 ml pasty katalizatora.

Take 1 Advanced Putty Volume Regular Set **34145**

Take 1 Advanced Tray Volume Fast Set **34146**

Take 1 Advanced Tray Volume Regular Set **34147**

Uzupełnienia mas w nabojach

Każde opakowanie zawiera: 2 x 50 ml naboje z masą, 6 dużych końcówek mieszających. Zestawy z masami Regular Body Wash i Light Body Wash zawierają 6 małych końcówek mieszających i 6 małych końcówek wewnętrznych. Zestaw masy Bite Registration (masa do rejestracji zwarcia) zawiera 6 dużych końcówek mieszających i 6 końcówek wewnętrznych Bite Registration.

Take 1 Advanced Bite Registration **34148**

Take 1 Advanced Light Body Wash Fast Set **34149**

Take 1 Advanced Light Body Wash Regular Set **34150**

Take 1 Advanced Regular Body Wash Fast Set **34155**

Take 1 Advanced Regular Body Wash Regular Set **34156**

Take 1 Advanced Medium Fast Set **34152**

Take 1 Advanced Medium Regular Set **34153**

Take 1 Advanced Tray Fast Set **34158**

Take 1 Advanced Tray Regular Set **34159**



Take 1 Advanced



Take 1 Advanced Putty Volume Regular Set 34145



Take 1 Advanced Tray Volume Regular Set 34147

Akcesoria

Kerr Volume Mixer - automatyczny mieszalnik do mas wyciskowych

Mieszalnik do mas wyciskowych firmy Kerr zaprojektowano do łatwego dozowania mas o dużej gęstości. Kerr Volume Mixer jest najszybszym i najłatwiejszym w obsłudze mieszalnikiem dostępnym w sprzedaży. Jego precyzyjny mechanizm hydrauliczny zapewnia uzyskanie za każdym razem pewnej, jednorodnej mieszaniny, a niewielkie wymiary umożliwiają ustawienie urządzenia w każdym gabinecie. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta, z szybką aktywacją. Mieszalnik umożliwia mieszanie materiałów dostępnych w opakowaniach Volume (AlgiNot, Take 1 Advanced), pozwalając na oszczędność czasu i pieniędzy.

Kerr Volume Mixer

33171



Kerr Volume Mixer

33171

Akcesoria do mas AlgiNot, Extrude, Take 1 Advanced i Take 1

Magazynek wielokrotnego użytku do opakowań Volume, do AlgiNot i Take 1 Advanced	32503 E
Końcówki mieszające Dynamic do wersji Volume, 50 szt., do AlgiNot i Take 1 Advanced	32502 E
Małe końcówki mieszające, żółte, 48 szt.	29363 E
Duże końcówki mieszające, turkusowe, 48 szt.	29333 E
Podajnik do mas w nabojach	28747
Końcówki wewnętrzne, małe, uniwersalne, 100 szt. końcówek jednorazowych	27517 E
Końcówki wewnętrzne, duże, 100 szt. końcówek jednorazowych	20731
Folia separacyjna, 18 szt.	09526
Końcówki wewnętrzne do masy Bite Registration, 100 szt.	34395



Końcówki typu Dynamic do opakowań Volume

32502 E



Magazynek wielokrotnego użytku do opakowań Volume

32503 E

V.P.S. Adhesive

Klej do łyżek wyciskowych, do mas A-silikonowych.

Butelka 15 ml	16622
Butelka 59 ml	25777



V.P.S. Adhesive 15 ml

16622



V.P.S. Adhesive 59 ml

25777

Mixing Pads - podkładki do mieszania

40 x 40 mm (do podkładów i kompozytów)	60677
100 x 120 mm (do materiału Permlastic)	60675
70 x 100 mm (do materiału TempBond)	60913
175 x 200 mm (duża)	61585



Mixing Pads

Solitine

Najbardziej skuteczny rozpuszczalnik do czyszczenia skóry oraz łopatek i innych narzędzi z resztek materiałów tiokolowych, tlenkowo-cynkowo-eugenolowych i silikonowych.

Solitine – butelka 250ml	60084
--------------------------	-------



Solitine

60084

Free Flo Syringe

Nadająca się do sterylizacji strzykawka do aplikacji mas wyciskowych na powierzchnię preparacji. Free Flo Syringe wykonana jest z przezroczystego plastiku, co ułatwia kontrolę ilości masy wyciskowej w strzykawce.

Free Flo Syringe	00126
------------------	-------

Kompletny zestaw z akcesoriami do wycisków do wkładów i mostów

Uzupełnienia	
Końcówki uniwersalne, 6 szt.	60241
Końcówki jednorazowe, 100 szt.	17511
Nakrywka	15808
O-ring do Free Flo Syringe, 10 szt.	25153



Free Flo Syringe

00126

Flexible Clearance Tabs™

Płytki, które pozwalają na wewnątrzustne, łatwe i precyzyjne określenie zakresu preparacji na powierzchniach międzyzębowych i okluzyjnych. Każda płytka oznaczona jest innym kolorem. Płytki dostępne są w wygodnych dozownikach. Do jednorazowego użytku.

Flexible Clearance Tabs - Płytki do kontroli zakresu preparacji	
---	--

Opakowanie po 30szt.	
Flex Tabs Pink, różowe, 1.0 mm	004-006
Flex Tabs Green, 1.5 mm	004-007
Flex Tabs Blue, niebieskie, 2.0 mm	004-008
Flex Tabs, asortyment	004-009



Flexible Clearance Tabs

Łyżki wyciskowe

Kwik Tray

Perforowane, aluminiowe łyżki częściowe do wycisków do koron, mostów oraz wkładów i nakładów.

Kwik Tray – opakowanie 24 szt.

61163



Kwik Tray

Masy polisulfidowe

Permlastic

Permlastic jest polisulfidową masą wyciskową dostępną w trzech gęstościach. Masa Light Body nadaje się do wycisków do wkładów i mostów. Wersja Regular Body polecana jest do wycisków do protez ruchomych. Gęstą masę Heavy Body stosuje się jako pierwszą warstwę w wyciskach dwuwarstwowych, łącznie z masą Light Body.

Permlastic – opakowanie standardowe

Zawartość: 1 tuba bazy (w przypadku Heavy Body w opakowaniu znajdują się 2 tuby), 1 tuba katalizatora, blok do mieszania

Permlastic Heavy Body

60099

Permlastic Regular Body

60101

Permlastic Light Body

60102



Permlastic

60099

Akcesoria

Permlastic Adhesive – klej do łyżek, butelka 60ml

60098

Masa termoplastyczna

Impression Compound

Termoplastyczna masa wyciskowa dostępna w płytkach i pałeczkach. Masa w płytkach przeznaczona jest do wycisków całkowitych lub częściowych. Masę w pałeczkach stosuje się do wycisków w pierścieniach miedzianych i do uszczelniania pobrzeży łyżki wyciskowej.

Kolory oznaczają temperaturę pracy masą.

Impression Compound – płytki, opakowania po 8 szt. (227g)

Kolor zielony (temp. 50°C)

60063

Kolor czerwony (temp. 55°C)

60059

Impression Compound – pałeczki, opakowania po 15 szt. (113g)

Kolor zielony (temp. 50°C)

60064

Kolor czerwony (temp. 55°C)

60060



Impression Compound

60064

Wyciski czynnościowe

F.I.T.T.

F.I.T.T. – Functional Impression Tissue Toner – żel miękko wiążący do wykonywania precyzyjnych wycisków czynnościowych. Po związaniu może być użytkowany przez kilka dni, co pomaga w gojeniu uszkodzonych tkanek oraz w adaptacji pacjenta do nowej protezy. Łatwy do mieszania. Preparat utrzymuje miękka konsystencję przez wiele dni.

F.I.T.T. – opakowanie standardowe **61127**

Zawartość: 100g proszku, 100 ml płynu, 15 ml separatora, 14 plastikowych pojemniczków do odmierzania i mieszania, 2 miarki do dozowania płynu.

F.I.T.T. - płyn, butelka 100 ml **61132**

F.I.T.T. - proszek, butelka 100 g **61144**

Plastikowe pojemniki do odmierzania i mieszania materiału **61141**



F.I.T.T.

61127

Luralite

Luralite jest łatwą w przygotowaniu pastą tlenkowo-cynkowo-eugenolową o przyjemnym smaku, przeznaczoną do wykonywania wycisków czynnościowych. Nie powoduje zniekształceń tkanek miękkich. Po związaniu posiada twardą konsystencję umożliwiając ponowne włożenie wycisku do jamy ustnej celem kontroli. Cechuje ją wysoka precyzja odwzorowania i niezmienność kształtu po związaniu.

Luralite – opakowanie standardowe **60073**

Zawartość: pasta bazowa 215 g, katalizator 65 g, Solitine 28 ml, 1 blok do mieszania.



Luralite – pasta wyciskowa

60073


Rejestracja zwarcia

Occlusal Indicator Wax

Wosk do kontroli kontaktów okluzyjnych.

Occlusal Indicator Wax **00655**

Zawartość: 180 pasków, ołówki wodoodporne.

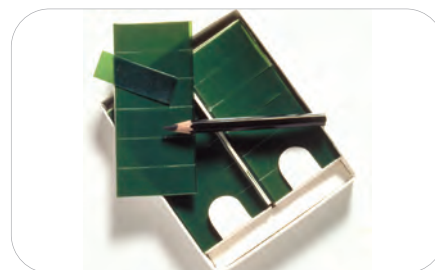

Occlusal Indicator Wax

00655

NOWOŚĆ

Take 1[®] Advanced™ Bite Registration

Take 1 Advanced Bite Registration **34148**

Zawartość: 2 x 50 ml naboje z masą Bite Registration, podajnik, 6 dużych końcówek mieszających, 6 końcówek wewnętrznych.



Take 1 Advanced Bite Registration

34148

Woski

Blue Inlay Casting Wax

Wosk odlewowy. Uplastycznia się łatwo w gorącej wodzie i doskonale się rzeźbi.

Wosk niebieski zwykły, opakowanie 12 pałeczek, ok. 25 g	60065
Wosk niebieski twardy, opakowanie 12 pałeczek, ok. 25 g	60067
Wosk niebieski zwykły, opakowanie 120 pałeczek, ok. 250 g	60066
Wosk niebieski twardy, opakowanie 120 pałeczek, ok. 250 g	60068



Blue Inlay Casting Wax

Sticky Wax

Wosk twardy, szybko twardniejący. Służy do naprawy modeli woskowych i do zespawania woskowych elementów. Doskonale do łączenia kanałów odlewowych z ich podstawą.

Opakowanie 12 pałeczek, 27.7 g	00623
Opakowanie 120 pałeczek, 277 g	00625




Sticky Wax

Boxing Wax

Przy puszkowaniu wycisków do protez całkowitych pałeczki wosku Boxing Wax umieszcza się wokół wycisku, tuż poniżej jego granic. Następnie umieszcza się pasek wosku Boxing Wax. Oba woski są lepkie, dzięki czemu posiadają doskonałą adhezję, bez ogrzewania.

Pałeczki, opakowanie 42 szt. (170 g)	00609
Paski, opakowanie 36 szt. (454 g)	00608

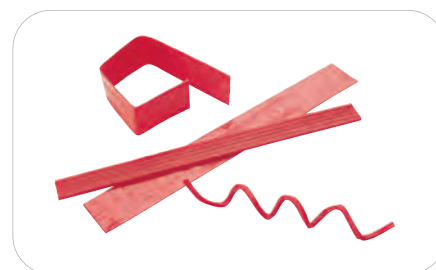

Boxing Wax

Orthodontic Tray Wax

Miękki plastyczny, biały wosk stosowany w ortodoncji do przedłużania pobrzeży łyżki oraz wykonywania stoperów dorsalnych podniebiennych.

Opakowanie 44 pałeczki (140 g)	09246
--------------------------------	-------



NOWOŚĆ

Disclosing Wax

Wosk o konsystencji kremu, stosowany do naprawy defektów modeli woskowych oraz sprawdzania przylegania protez częściowych i całkowitych do tkanek miękkich.

Disclosing Wax, opakowanie 57 g	00610
---------------------------------	-------



Disclosing Wax

